Vet health petia

Petia
DIAGNÓSTICO
rápido

Perros

LEISHMANIA
LSH Ab

Nº de autorización: 11586-RD

Uso exclusivo veterinario

TÉCNICA DEL TEST:

Petia Diagnóstico Rápido para *Leishmania* (LSH) Ab es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral tipo sándwich, indicado para la detección rápida y cualitativa del LSH Ab en sangre entera, suero o plasma de perros.

El dispositivo dispone de un orificio para la aplicación de la muestra y una ventana de prueba, con una zona invisible de prueba (T) y una zona de control (C).

Cuando la muestra se aplica en el orificio de muestra del dispositivo, el reactivo fluye lateralmente sobre la superficie de la tira de prueba.

Si hay suficiente LSH Ab en la muestra, la banda T se hará visible y también la banda de control C, que debe aparecer siempre para dar el resultado como válido.

MATERIAL SUMINISTRADO:

Dispositivos envasados en bolsa de aluminio individual conteniendo desecante	10
Viales con anticoagulante (ETDA).	10
Pipetas desechables	10
Frasco con Solución Tampón	1
Prospecto con instrucciones de uso	1

MUESTRAS:

Sangre entera, suero o plasma de perro.

RECOGIDA DE MUESTRA:

SUERO:

-Extraer una muestra de sangre, dejarla reposar durante 30 minutos para su coagulación y centrifugarla evitando los glóbulos rojos.


PLASMA:

-Extraer una muestra de sangre y añadirla a un vial con anticoagulante (EDTA) y separarla por centrifugación.


SANGRE ENTERA:

-Extraer una muestra de sangre y añadirla a un vial con anticoagulante (EDTA).

A) MUESTRA DE SUERO

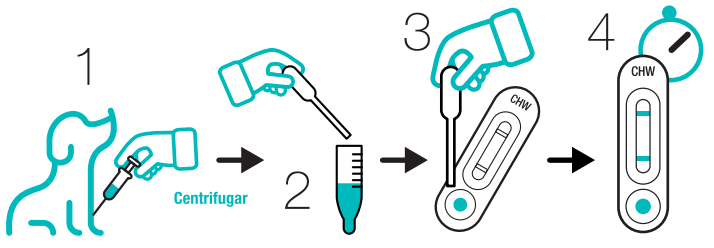

B) MUESTRA DE SANGRE O PLASMA

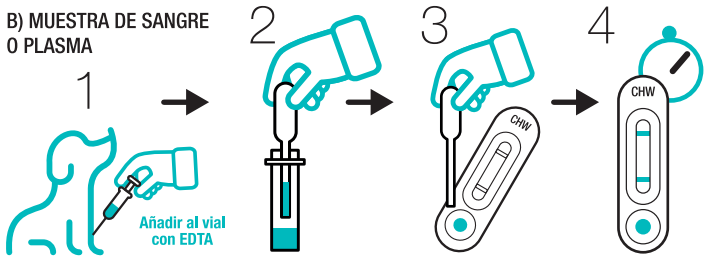

INSTRUCCIÓN DE USO:


- Extraer el dispositivo de la bolsa de aluminio y colocarlo sobre una superficie plana y horizontal.
- Agregar en el orificio del dispositivo una gota de muestra con la pipeta e inmediatamente después, agregar 4 gotas de la solución tampón.
- Interpretar el resultado a los 5 - 10 minutos. ATENCIÓN: Pasados 10 minutos, no se podrá considerar válido el resultado.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

(1). **Positivo:** La presencia de las dos bandas C y T, sin importar si la banda T es clara o vaga.

(2). **Negativo:** Solo aparece claramente la banda de control C.

(3). **No válido:** Si no aparece la banda de control C, sin importar si aparece o no la banda T.

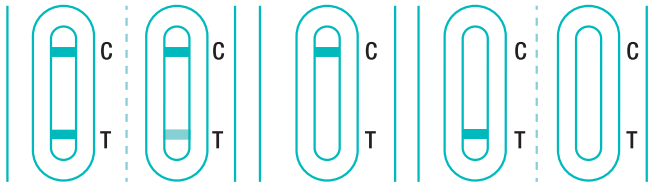

CONSERVACIÓN

Petia Vet Health garantiza la estabilidad de la prueba hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada y cumpliendo las siguientes indicaciones:

- Conservar entre 2 y 30°C.
- Evitar su congelación.
- Evitar la luz del sol directa.

PRECAUCIONES

- Para obtener los mejores resultados, siga estrictamente estas instrucciones.
- El Dispositivo debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso.
- No usar después de la fecha de caducidad.
- No extraer el Dispositivo de la bolsa de aluminio hasta que la prueba esté lista para llevarse a cabo. Una vez abierta la bolsa de aluminio, realizar la prueba antes de una hora. El Dispositivo puede verse afectado ante una sobreexposición al aire y la humedad.
- Todo el material incluido (dispositivo, pipetas, solución tampón, frasco EDTA) es desechable. No se debe reutilizar. Una vez que la prueba ha finalizado, desechar correctamente todas las muestras y dispositivos de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio (BPL).
- En caso de un resultado anómalo después de aplicar la muestra, no retirar la tira reactiva del dispositivo.
- Cada lote de los componentes de esta prueba ha sido validado como una unidad estándar. No mezclar componentes procedentes de lotes diferentes.

LIMITACIONES

-La prueba es para uso exclusivo veterinario.

-Aunque la prueba es segura, no se puede excluir una pequeña posibilidad de falso negativo y falso positivo causada por diversos factores. Por lo tanto, además de los resultados de la prueba, los veterinarios deben considerar otra información clínica y métodos de diagnóstico de laboratorio para obtener un diagnóstico clínico definitivo.

Comercializado por Petia Vet Health S.A.U.
La Relva s/n. Torneiros. Porriño. 36410. Pontevedra. España. - https://petia.es / info@petia.es / +34 986330400.
N.º de registro sanitario: R-10130. - N.º de autorización: 11586-RD
Fabricado por Bioguard corporation 6F. No.20-1. Wu-Kong 5th Rd, New Taipei City 24890, Taiwan.